


ビーQueenの毛先を、歯面に軽く
垂直にあてて、小さく震わせます。

外側のみがき方




※歯肉には
あてない

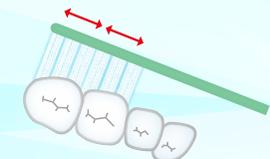


②歯ブラシの毛先を
歯のすきまに入れ、前後に
数ミリ振動させてみがく

①歯ブラシは歯に
直角にあてる

内側のみがき方

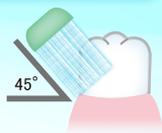

①歯ブラシを45°の
角度で歯にあてる

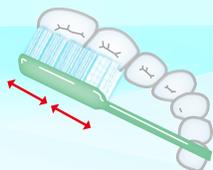

②外側と同じように
数ミリ振動させてみがく



外側も内側も6カ所に分けて、
1カ所につき30回ほど
振動させましょう。


汚れのたまりやすい所は、重点的にみがきましょう。

みがき残しの多い場所

かみあわせの溝

歯と歯の間

歯と歯肉のさかい目

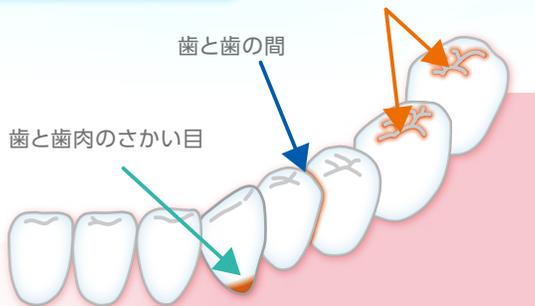

歯のすきまに届く超極細毛で、耐久性にも優れました。

Tooth Brush Bee QUEEN

ビーQueen

健康な歯のトラブル予防を、しっかりサポートします

さわやかなホワイトボディ
ラバーグリップは4色



ビーQueen95

ラバーグリップカラー



パープル オレンジ ブルー ピンク

傷んだ歯肉にやさしい感覚で、効果的にブラッシングできます

おしゃれなパール系ボディ
ラバーグリップは4色



ビーQueen105

ラバーグリップカラー



パープル オレンジ ブルー ピンク

●全タイプとも耐熱性(100℃)があり、煮沸消毒できます。

■発売元



株式会社 ビーブランド・メディコーデンタル

■お問い合わせ先 (株)ビーブランド・メディコーデンタル

本 社：大阪市東淀川区西淡路 5-20-19 tel 06-6370-4182

東京(営)：東京都千代田区神田錦町 1-14 tel 03-3295-6926

<https://www.bee.co.jp>

高性能歯ブラシ & 歯みがきミニガイド

Tooth Brush Bee QUEEN

ビーQueen

歯力自慢。

歯は一生の財産。

よい歯ブラシで、正しくみがき、

自慢の強い歯を。

品質と信頼のビーブランドがお届けします。

Bee BEE BRAND
MEDICO DENTAL

弾力性のある超極細毛の〈ビーQueen〉。 今までにないブラッシング感覚を実感いただけます。



ソフトタッチでしっかりした
フィット感のラバーグリップ。
ブラッシングヘッドを的確に
コントロールできます。

画期的な超極細毛先。 耐久性にも優れました。



- ①超極細の毛先は、せまい歯と歯のすきまにとどき、汚れをかき出します。
- ②超極細にもかかわらず「ビーQueen」の毛先は、耐久性に優れています。

毛先が長持ちする、 おトクな歯ブラシです。

歯ブラシの毛先は、細いとすぐに広がる欠点がありました。「ビーQueen」は先進技術を駆使して、耐久性のある、超極細の毛先を実現。長持ちするおトクな歯ブラシは、毎日使うものだけに、うれしいですね。

毛先のやさしい感触で、 汚れをしっかりと落とせます。

歯ブラシを力まかせにゴシゴシ。そんなみがき方をしていませんか。それでは、きれいにならないばかりか、かえって歯や歯肉をいためてしまいます。やさしい効果的なみがき方は、「ビーQueen」の毛先を歯と歯のすきまにさし入れ、小さきみに振動させます。弾力性のある毛先が、歯垢や食べ物のカスをかき出してくれます。

歯の状態に合わせて選べる2タイプ。

健康な歯の
トラブル予防を、
しっかり
サポートします。

Bee QUEEN95

ビーQueen95は、毛の長さが9.5mm。弾力性のある超極細毛は、歯肉炎の予防にも高い評価を得ています。

傷んだ歯肉に
やさしい感覚で、
効果的にブラッ
ッシングできます。

Bee QUEEN105

ビーQueen105は、毛の長さが10.5mm。接触感がソフトで、歯の治療などされている方におすすめします。

超極細毛先で歯面をしっかり捉えてプラーク除去

- Bee QUEENの超極細毛
- 従来の超極細毛



毛先が面を
とらえる!

毛先が面から
逃げてしまう

ストレート

テーパード

超極細



ビーQueenのブラッシング効果



ブラッシング前



ブラッシング後

■症例写真提供/明海大学PDI診療所