

Bee BEE BRAND
MEDICO DENTAL

Dr.Bee



Dr. Barman's SUPER BRUSH

スーパー磨ける“スーパーブラシ”

Dr. Barman's

3面磨

きで、3倍

はやい!!

うわべ磨きもこれで克服!!

ノルウェーの研究所から誕生した画期的歯ブラシ
磨きやすさ、ぴかいちです。

きちんと歯を磨くには、巧みなブラッシング技術と、ブラッシングに費やす時間が必要となります。しかし、80%の人が歯磨きの時間が1分に満たず、「うわべ磨き」になっています。ならば、人々の習慣に合わせて歯ブラシを変えよう!とノルウェーの歯科医Dr. パールマンの研究により誕生した3面ヘッドのスーパーブラシ。45°の3面ヘッドが歯全体を理想の角度で包み込み、内側も外側もしっかり磨けます!

磨くのが簡単だから、こんな方にもおすすめです。

◎介護・介助をされている方 ◎身障者の方 ◎お子様の仕上げ磨き

軽いタッチのストロークで簡単に口の中全体をキレイにできます。



開口維持が困難な方でも奥歯まで簡単に磨くことができます。




このように裏面の汚れまで一度でキレイになります。



前歯も一度のストロークで表裏一緒に磨くことが可能です。

新 感 覚 !

磨 き や す さ !

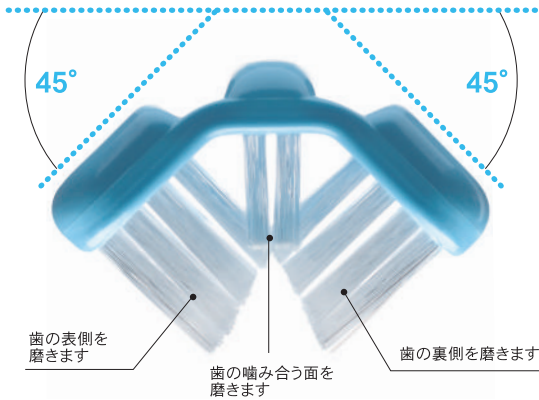

HOW TO USE



1 歯をはさむ感じで歯ブラシを歯に当ててください。



2 ハンドルを優しく持って細かいストロークで数本の歯を同時に磨いてください。



3 細かく磨きながら、さらに歯の内側、外側を傾けて磨いてください。

3面の
ヘッドブラシ

1分間の
清掃効果大。

3包囲から一挙に磨ける機能性。その機能を最大限に活かすから、短時間でも磨けるのです。

歯の「表側」、「裏側」、「噛み合う面」すべての場所を磨くのが正しい歯磨きの基本です。すべての歯が生えそろうている場合ですと時間的に7~8分かかるはず。でも3包囲から同時に磨いてくれる3面ブラシだから、短時間での清掃効果がアップします。




軽い
タッチでOK

力がいらぬい。

歯をはさむ。そんな感覚。ハンドルは強くにぎらず、軽くつかんで。

歯磨きをするときのベストな力の入れ具合は、気持ちがいいと感じる強さ。こった肩をもみほぐす時のような、かゆい所をかくときのよな、強過ぎず、弱過ぎず、気持ちのいい強さがあるはず。力を入れずにしっかりと磨けるのでお子様やご高齢の方にも便利です。

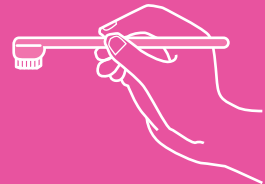

45°の
ベストな角度

みがきやすい。

良い歯の磨き方とされているのは、斜め45°の磨き方。でも45°ってどれくらい? 気がつけば歯茎を傷つけてしまったり、意外と難しいですね。スーパーブラシはブラシのカットに合わせて歯をはさむだけでベストな角度で磨くことができるので、とても磨きやすいんです。



輸入総代理店 **(株)ビーブランド・メディコーデンタル**

大阪営業所: 大阪市東淀川区西淡路5-20-19
TEL: 06-6370-4182 FAX: 06-6370-4184

東京営業所: 東京都千代田区神田錦町1-14
TEL: 03-3295-6926 FAX: 03-3295-6927

商品名	Dr.Berman's スーパーブラシ	耐熱温度	80℃
本体サイズ	全長170mm	ハンドル材質	ABS樹脂
価格	オープン価格	毛材質	ナイロン
生産国	ノルウェー	毛の硬さ	やわらかめ