

歯科材料 04 歯科用根管充填材料
管理医療機器 歯科用根管充填シーラ (コード：36095000)

キャナリスタ

【禁忌・禁止】

本材の成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本材は、下記品目より構成される。

品目名	形状	成分
散	粉末	酸化亜鉛、ロジン、硫酸バリウム
液	液体	チョウジ油、脂肪酸


本品は、散及び液からなり、それらを練和するとき、散含有成分と液含有成分のキレート反応により硬化する。

【使用目的又は効果】

抜髄後あるいは感染根管治療後の根管充填に用いる。

【使用方法等】

通常、液：1滴（約 0.03mL）に対して散：約 0.06～0.09g（下図参照）の割合で採取・練和し、ペースト状として用いる。なお、液と散の配合比は適宜増減できる。

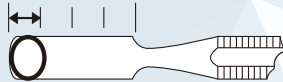

例) 幅6mmのスパチュラ1/4に小さい山ができる量

【操作可能時間】

ペーストは練和後、約 20～30 分間の操作可能時間を有する。
※夏期や高温多湿の環境下では、操作可能時間が短くなることもある。

【使用方法】

(1) 練和操作

本剤を適量、練板上にとり、スパチュラを使用して約 1 分間で均一に練和する。

(2) 根管の清掃

通法により根管内の洗浄を行い、ペーパーポイント等を用いて根管内を十分乾燥させる。

(3) ポイントの挿入

試適しておいたマスターポイントの根尖側半分の本剤を塗布し、根管内にて静かに上下運動をさせながら、根尖部を完全に満たし、同時に本剤の空気を抜き、所定の位置まで挿入する。

(4) 充填操作

レンツロに少量の本剤をつけ、根管内に挿入してから低速で回転を始め、根管壁に本剤を塗布する。レンツロを引き出す際には、軽く壁に押し付けながら引き出す。太い根管では本剤を塗布したアクセサリーポイントを使用し、スプレッターにより形成した空隙に挿入していく。

※根管充填の際には、本品を根尖外に溢出させないように注意して充填する。

(5) 仕上げ操作

加熱したエキスカベーター等を使用して根管口付近で余分なガッタパーチャポイントを切除し、根管ブラガーを使用して根尖方向へ加圧する。また、余剰の本剤はアルコール綿で拭き取る。
※本品は X 線造影性を有する。
※根管内の硬化物は、根管充填材用軟化材で軟化でき、撤去することができる。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ①本材の「散」には必ず本材の「液」を使用すること。
- ②使用後、器具等に付着した本材は、硬化しないうちにアルコール綿などで拭き取ること。
- ③本材は、[使用目的又は効果]の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ④本材は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ①本材の使用により、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ②本材が口腔軟組織や皮膚に付着したり、目に入らないように注意すること。付着した場合には、すぐに大量の流水で洗浄すること。また、目に入った場合には、直ちに多量の水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本材は、光を避けて室温で保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

[有効期間]

本品の有効期間は 3 年とする。
[自己認証（当社データ）による。]

【製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 ビーブランド・メディコーデンタル
住所：〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路 5 丁目 20 番 19 号
電話番号：06-6370-4182 FAX：06-6370-4184

■製造販売元



(株)ビーブランド・メディコーデンタル

本 社：大阪市東淀川区西淡路5-20-19 | 東京営業所：東京都千代田区神田錦町1-14
TEL:06-6370-4182 FAX:06-6370-4184 | TEL:03-3295-6926 FAX:03-3295-6927

<http://www.bee.co.jp/>



製品情報は弊社ホームページまで

■お取引先材料店

新発売

2020 年
1 月 21 日



歯科用根管充填シーラ

CANALISTA

キャンナリスタ

管理医療機器

Bee BEE BRAND
MEDICO DENTAL

歯科用根管充填シーラ

CANALISTA

キャナリスタ

■ 低ユージノール設計

組織為害性のあるユージノールの
含量を低減させました。

■ 硬化微膨張

硬化時、わずかに膨張し
死腔の発生を防止します。

■ 良好な根管封鎖

根管内を緻密に塞ぎ、優れた封鎖性を示します。
硬化後は不溶解性で根管内に溶け出しません。

■ 適度な流動性

散と液の割合を適宜増減することで
お好みの粘度・流動性で使用いただけます。

■ X線造影性の付与

練和後の操作可能時間

約 20～30 分

* 夏季や高温多湿的环境下では、操作可能
時間が短くなることがあります。

使用可能回数

約 250 根管

* 1 根管に対して液 1 滴（散液比：2.5：1）
にて使用した場合

■ 使用方法



1 粉を 1cm ひとやま程度、
スパチュラで取ります。



2 液を 1 滴滴下します。



3 ペースト状になるように
練和します。



4 軽く糸を引く程度の粘度で
ご使用ください。

ご使用に際しては、添付文書をよく読んで正しくご使用ください。

■ 封鎖性実験

ガラス管に填塞したシーラーを 1% メチレン
ブルー液に浸漬した実験において、色素の
明らかな浸透はありませんでした。（右図）

実験方法

練和したキャナリスタを内径 5mm のガラス管に高さ 20mm となるよう
に充填し温度 37℃、湿度 100%RH の条件下で硬化させた。硬化させた後、
1% メチレンブルー液に温度 37℃、湿度 100%RH の条件下で 24 時間浸漬
し、色素の浸透を観察した。

散液比

2：1

2.5：1

3：1



散少なめ

散多め

いずれも色素の明らかな浸透はありません

散



液



■ 製品情報

一般的名称	歯科用根管充填シーラ
クラス分類	クラス II 管理医療機器
類別コード	歯科材料 04
類別名称	歯科用根管充填材料
貯蔵・保管方法	光を避けて室温で保存すること
包装	散：15g 液：10mL
有効期間	3 年
認証番号	301AFBZX00037000
認証年月日	2019 年 9 月 11 日
販売開始年月	2020 年 1 月
参考医院価格（税別）	散：¥4,700 液：¥4,700