



## 包装表記およびコック封入位置変更のお知らせ

器具除菌洗浄液

# ナクロガードG

株式会社ビーブランド・メディコーデンタル

謹啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、器具除菌洗浄液「ナクロガード G 10L」の包装表記およびコック封入位置を変更いたしますのでご案内申し上げます。

謹白




### 1 対象製品

ナクロガード G 10L

### 2 変更内容

- 2-1 包装の表記を変更
- 2-2 コック封入位置の変更


変更内容 2-1 包装の表記を変更

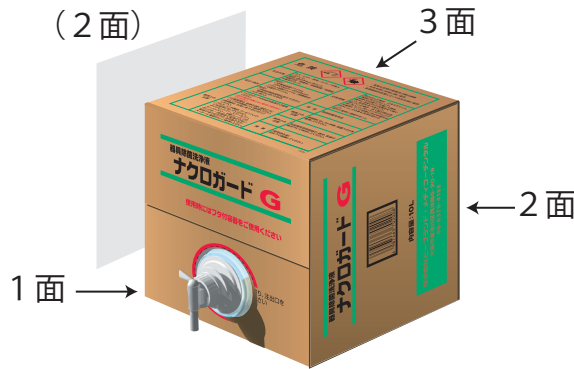

	変更前	変更後
1面		<p>① ②</p>
2面		<p>③</p>
3面		<p>④</p>

## 変更箇所

- ① デザインを変更
- ② 注出口の引き出し方法を変更
- ③ デザインの変更および成分の記載削除
- ④ 注意喚起語、絵表示、危険有害性情報、応急措置の記載追加および使用上の注意の記載整備

危険		 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷</li> <li>・ 水生生物に非常に強い毒性</li> <li>・ 長期継続的影響によって水生生物に毒性</li> </ul>	
安全対策	ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後は手をよく洗うこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。	応急措置	飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 皮膚(又は髪)に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水で洗うこと。 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。
成分・性状	[成分] ○次亜塩素酸ナトリウム (2400ppm～3000ppm) ○オルト珪酸ナトリウム (防錆成分) ○水酸化ナトリウム [性状] ○本品は無色透明な液で、わずかに塩素のにおいがある。 ○pH: 約13	用途	器具除菌洗浄液
使用上の注意	○ナクロガードGは必ず原液でご使用ください。 ○他の製品や酸とは、絶対に混ぜないでください。 ○小器具類は、全体が液に浸るようにしてフタ付容器にてご使用ください。 ○混濁後は、水洗いを十分に行ってください。 ○アルミ、メッキ製品、タービンヘッドには使用しないでください。 ○ダイヤモンドバー、スチールバー、カーバイドバー、印象トレーにつきましては、一部製品で使用できない製品がありますので、お手数ですがメーカーに確認の上ご使用ください。	取扱上の注意	使用時には、ゴム手袋、保護メガネを着用してください。
		保存上の注意	非金属性気密容器で、遮光、室温の条件下にて保存してください。
		廃棄	[使用済み液] 流水下で廃棄してください。

2101


## 変更内容 2-2 コック封入位置の変更

コックは、中の容器にテープで固定しています。

ミシン目を切り取って中をのぞき込むと、コックをご確認いただけます。



<イメージ図>

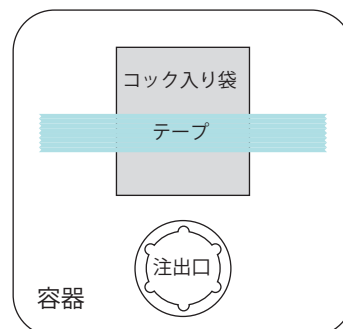

### 3 変更品の製造番号及び出荷時期

---

製造番号：72605271

出荷時期：2026年7月末頃

※出荷時期は若干前後することがありますので、ご了承ください。